


Iris

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE



Opklapbare steun Iris

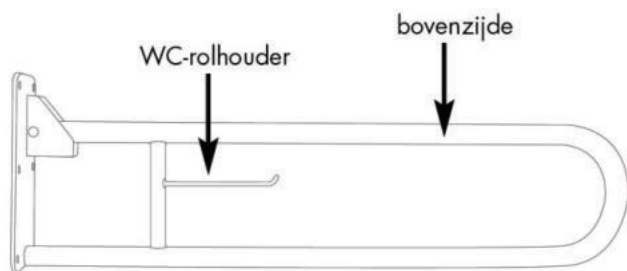

1 Bij levering

Pak het product uit en controleer of de levering volledig is. In het pakket zitten:

- 1 opklapbare steun
- 6 schroeven
- 6 muurpluggen
- Handleiding

Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer blijkt dat uw product een defect vertoont, neem dan contact op met de transporteur.

2 De badkamergreep installeren



VOORZICHTIG


Gevaar voor letsel

- Zorg ervoor dat de badkamergreep goed bevestigd is aan de muur. Controleer regelmatig de bevestiging.
- Zorg ervoor dat zich geen elektrische kabels of andere buizen in de montageruimte van de badkamergreep bevinden.
- De pluggen die met het product geleverd worden, zijn geschikt voor betonnen of volle stenen muren. Laat u voor andere soorten muren informeren over het correcte bevestigingsmateriaal.

De opklapbare steun Iris is ontworpen om u te helpen bij het opstaan. Een toiletrolhouder is tevens voorzien. De handgreep is overal te gebruiken, inclusief vochtige ruimtes. Gebruik het montagemateriaal dat bij Iris geleverd werd.

Om Iris te installeren:

1. Plaats de badkamergreep in de gewenste positie.
2. Duid de montagegaten aan op de muur.
3. Boor gaten in de muur.
4. Plaats de pluggen.
5. Plaats de badkamergreep tegen de muur.
6. Plaats de schroeven en draai stevig aan.

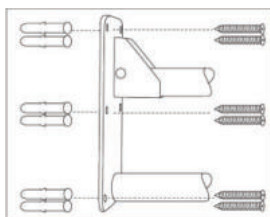

Indien u ergens over twijfelt, aarzel dan niet om een professioneel persoon te contacteren om Iris voor u te installeren.

3 De badkamergreep gebruiken



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel, brandwonden

- Wees voorzichtig bij het gebruik in extreem warme of koude omgevingen (zon, extreme kou, sauna's, enz.).
- Gebruik Iris niet indien u enig defect opmerkt.
- Hang geen zware voorwerpen aan de steun, dit kan schade veroorzaken.

Het maximale trekgewicht voor de badkamergreep is 130 kg.

4 Onderhoud

Iris kan gereinigd en gedesinfecteerd worden met normale huishoudelijke producten. Gebruik geen agressieve producten die beschadigen kunnen veroorzaken.

Door de hoogwaardige oppervlaktebehandeling is een optimale corrosiebescherming gegarandeerd. Wanneer de buitenste coating door krassen e.d. is beschadigd, laat deze dan door uw vakhandelaar repareren.

4.1 Verwachte levensduur

De badkamergreep is ontwikkeld voor een gemiddelde levensduur van 5 jaar.


5 Technische specificaties

Merk	Vermeiren
Type	Badkamergreep
Model	Iris

Omschrijving	Afmetingen
Max. belading	130 kg
Lengte	740 mm
Hoogte	175 mm
Minimale oppervlakte voor montage (montageplaat)	230 x 100 mm
Opslagtemperatuur	+5°C - +41°C

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren.
Meettolerantie, +/- 15 mm / 1,5kg / 1,5°.

Stützklappgriff Iris

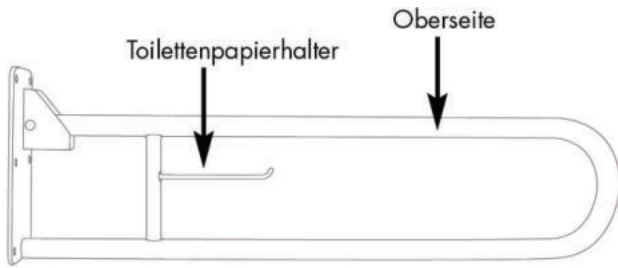

1 Bei Lieferung

Packen Sie Ihr Produkt aus und kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 Stützklappgriff
- 6 Schrauben
- 6 Dübel
- Handbuch

Prüfen Sie die Sendung sorgfältig auf Transportschäden. Sollten Sie nach der Auslieferung Schäden feststellen, wenden Sie sich an den Frachtführer.

2 Montage des Haltegriffs



VORSICHT


Verletzungsgefahr

- Prüfen Sie, dass die Handgriffe sicher und fest an der Wand verschraubt sind. Überprüfen Sie die Fixierung regelmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel oder Rohre an den Bohrstellen vorhanden sind.
- Die mit dem Produkt gelieferten Stopfen sind für Betonwände oder Vollziegelwände geeignet. Bei anderen Wandtypen erkundigen Sie sich bitte nach der richtigen Art der Montageausrüstung.

Der Stützklappgriff Iris unterstützt Sie beim Hinsetzen auf und Aufstehen. Ein Papierhalter ist integriert. Sie sind überall anwendbar auch in feuchten Räumen. Nutzen Sie nur das Montagematerial, das im Lieferumfang enthalten ist.

Installation Iris:

1. Setzen Sie den Handgriff an die gewünschte Position.
2. Markieren Sie die Bohrposition für die Verschraubungen.
3. Bohren Sie die benötigten Löcher in die Wand.
4. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.

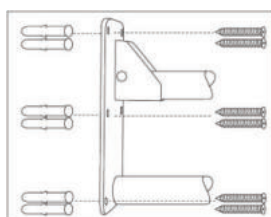

5. Setzen Sie den Handgriff auf die gewünschte Position auf.
6. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie fest an.

Sollten Sie unsicher bei der Montage sein, ziehen Sie einen Fachmann zur Montage hinzu.

3 Verwenden des Haltegriffs



VORSICHT

Verletzungsgefahr

- Achten Sie darauf, dass Sie den Handgriff keinen extremen Temperaturen aussetzen (Sonnenschein, extreme Kälte, Sauna etc.).
- Bei Schäden ist der Badezimmergriff Iris nicht zu nutzen.
- Hängen Sie keine schweren Gegenstände an den Stützklappgriff, da dies Schäden verursacht.

Das maximale Zuggewicht für den Haltegriff beträgt 130 kg.

4 Wartung

Zur Reinigung des Badezimmergriffs Iris sind nur handelsübliche Haushaltsreiniger zu nutzen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, da sonst Verfärbungen auftreten können.

Durch die hochwertige Lackierung wird ein optimaler Korrosionsschutz gewährleistet. Falls die Lackierung durch Kratzer oder ähnliches beschädigt wird, sollten Sie einen Fachhändler aufsuchen, um die betroffene Oberfläche instand setzen zu lassen.

4.1 Erwartete Lebensdauer

Der Haltegriff ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 5 Jahren ausgelegt.

5 Technische Daten

Hersteller	Vermeiren
Typ	Badezimmergriff
Modell	Iris

Beschreibung	Abmessungen
Maximale Last	130 kg
Länge	740 mm
Höhe	175
Minimale Montagefläche (Montageplatte)	230 x 100 mm
Temperaturbereich für Lagerung	+5°C - +41°C

Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Messtoleranz von ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5 °

CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il fabbricante o il distributore :

VERMEIREN GROUP

Indirizzo :

Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
Belgio

dichiara sotto la propria responsabilità, che i seguenti dispositivi medici marchiati CE:

Gruppo Prodotto: Maniglie
Gruppo Prodotto (GMDN): Maniglie per il bagno (GMDN 35584)
Marchio: Vermeiren
ISO 9999: 18 18 06
Tipo: 680, 681, 682, 683, Iris, Ivy, Izzie, Ina

sono classificati come di Classe I, come da allegato IX 93/42/CEE, riga 1,

e vengono fabbricati secondo le normative sotto riportate, comprese le ultime variazioni e secondo la legge nazionale che regolamenta dette direttive :

Normative sui dispositivi medici 93/42/CEE: 2007

e rispettano le seguenti normative europee armonizzate:

EN 12182: 2012

Luogo, Data : Kalmthout, 20 Ottobre 2016

Firma :



Nome : Patrick Vermeiren
Ruolo : CEO



VERMEIREN GROUP
Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout
Belgio
Tel: +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com
info@vermeiren.be