



TRASFERIMENTI


Supporti per il trasferimento

Assicelle

Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility




- ↔ 77 cm
- ↙ 32,5 cm
- ↑ 4 mm
- 📦 1,23 kg
- 👤 150 kg*

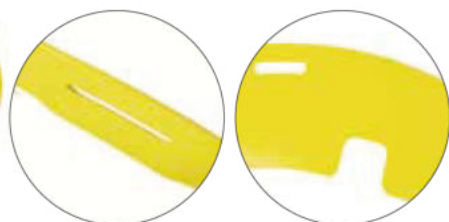


*Distribuiti su 40 cm di superficie, con peso in appoggio di 25 kg distribuiti su 15 cm da ambo i lati.

Assicella in fibra sintetica ad elevata scorrevolezza per i trasferimenti dell'utente. È ideata per essere effettivamente trasportabile, infatti ha uno spessore di soli 4 millimetri ed un foro di impugnatura per la mano. L'assicella Buffalo 150 ha una colorazione vivace ed un doppio incavo per una maggiore stabilità e garantire la massima sicurezza durante il trasferimento. La fibra composita assicura elevata resistenza

e consente di evitare le dannose scheggiature superficiali che si creano nel tempo con altri materiali. L'elevata scorrevolezza nella parte superiore consente di scivolare agevolmente, consentendo il trasferimento. La scorrevolezza nella parte inferiore permette ad utenti con poca forza nelle mani di rimuoverla da sotto le gambe una volta effettuato il trasferimento. Certificata CE, dispositivo medico di classe I, prodotta in Italia.

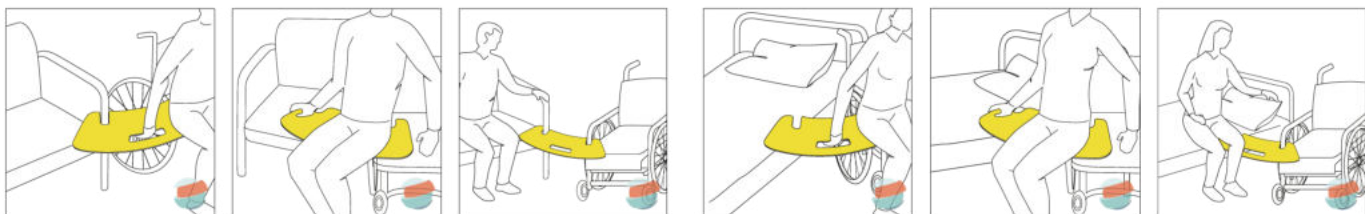

L'assicella Buffalo 150 è un ausilio che si caratterizza per duttilità e versatilità di utilizzo. Può essere facilmente impiegata per piccoli trasferimenti in qualsiasi ambiente interno, sia ad esempio camera da letto, sala, cucina o bagno; come accade per lo spostamento da carrozzina a divano, letto, sedia o wc (e viceversa).

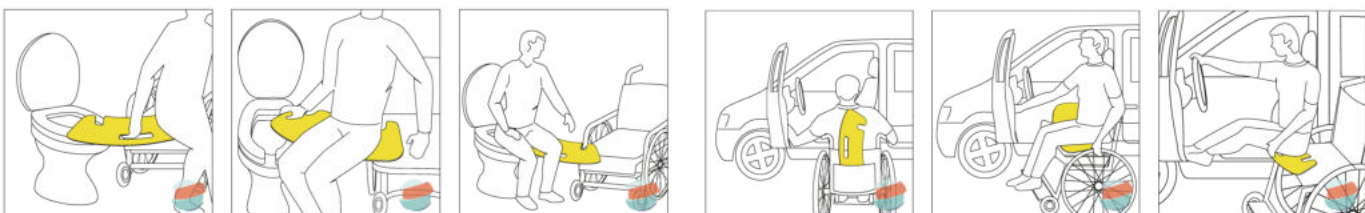

In ambiente esterno l'assicella, facilmente trasportabile grazie all'ingombro ed al peso limitato, è impiegata per lo spostamento in auto (entrata e uscita dall'abitacolo) o su panchine, sedie, divani di luoghi pubblici.

Codice articolo	Descrizione
ALL 03	Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility

Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility con grip antiscivolo

Assicella Buffalo 150 dotata sulla base inferiore di due fasce in materiale antiscivolo per favorire il grip tra l'ausilio ed i punti di appoggio delle superfici di trasferimento.

Le sezioni antiscivolo stabilizzano maggiormente l'assicella.

Codice articolo	Descrizione
ALL03 GRIP	Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility grip antiscivolo

- ↔ 77 cm
- ↙ 32,5 cm
- ↑ 4 mm
- 📦 1,23 kg
- 👤 150 kg*



*Distribuiti su 40 cm di superficie, con peso in appoggio di 25 kg distribuiti su 15 cm da ambo i lati.

Grip antiscivolo applicabile

- ↔ 23 cm
- ↙ 8 cm
- 2 pz



Coppia di bande autoadesive applicabili sull'assicella di trasferimento, l'utente può scegliere dove posizionarle in base alle proprie esigenze.

Codice articolo	Descrizione
ALL ADESIGRIP2	Grip antiscivolo applicabile a Buffalo 150 - confezione da 2 pz



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ai sensi dell'Allegato VII della Direttiva 2007/47/CE

Nome del Fabbricante: ALLMOBILITY TRADING S.r.l.
Indirizzo: sede operativa: Via G. Balla, 4 42124 Reggio Emilia (RE) - ITALIA
sede legale: Via Mentana, 150 43100 Parma (PR) - ITALIA

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE:

Denominazione generica: ASSICELLA DI TRASFERIMENTO
Denominazione commerciale: BUFFALO 150
Funzione: SUPPORTO PER IL TRASFERIMENTO DELL'UTENTE
Codice prodotto: AII03
Opzioni di prodotto/accessori disponibili: non disponibili

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E' CONFORME ALLA PERTINENTE NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE

Direttiva 2007/47/CE Direttiva Dispositivi Medici
(classificazione del dispositivo secondo Allegato IX: classe I)

La documentazione tecnica prevista dalla direttiva suddetta è conservata e tenuta a disposizione delle autorità presso la sede del Fabbricante di cui all'intestazione.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmato a nome e per conto di:
Paolo Pivello (Amministratore)

Reggio Emilia, 25/02/2016